

match *Maker*

schottlander

Dođal estetiđi matchmaker ile yakalayın.

METCODENTAL

matchMaker

schottlander

Porselen Sistemleri



Matchmaker Porselen Sistemleri



Matchmaker porselenleri, doğal dişle özdeş üç önemli özelliği ile modern diş hekimliğinin gerek estetik, gerekse teknik tüm taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış benzersiz ürünlerdir. Ardında 45 yıllık porselen üretim deneyimi bulunan İngiliz Schottlander firması tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme çabaları sonucu ortaya çıkmış komple sistemlerdir. Matchmaker porselenleri saf quartz minerallerin altı kademeli üretim sürecinden geçmesi sonrası bonding özellikli olarak üretilir. Çok ince granüldür ve çekme oranı minimum düzeye indirilmiştir. Matchmaker yüksek kalitede metal seramik kron ve köprülerin yaratılmasına olanak tanıdığı gibi, aynı zamanda diş hekimliğinde aranan, inlay, onlay, laminate ve tüm dişler



için jaket kron tekniklerini de içeren, her çeşit estetik sonuca ulaşmada başarıyla kullanılabilir. Firmamız: yaklaşık 1994 yılında ülkemize kazandırdığı, Matchmaker Porselen Sistemlerinin tüm versiyonlarını, en ince ayrıntısına kadar kullanıcıya sunmakta ve bulundurmaktadır. Bu versiyonlar Matchmaker Metal Üstü Seramiğin Klasik ve T serisi olarak adlandırılan yarısaydam özellikli iki farklı versiyonu, Matchmaker Press Seramik ve Press sistem aksesuarları, Sentetik özellikli Matchmaker Düşük Isı Porseleni, Matchmaker Alüminyum oksit altyapı üstü seramiği ve yeni Matchmaker Zirkonyumoksit altyapı üstü seramiğidir.

Sistemin Sırrı

Matchmaker doğal diş ile porselenin eşleşmesi anlamına gelir. matchmaker'ın sunduğu estetik sonuçların ardında gerçek dişteki gibi iki dentin ve bir mine katmanından oluşan üç boyutlu doğal yapı yatmaktadır. Işığın, doygunluk, yoğunluk, renk ve parlaklık bakımından farklı, porselen katmanlarından geçerken kırılıp yansması sonucu porselende, derin ve renk doygunluğuna sahip bir görünüm elde edilir. Bu farklı porselen katmanlarından birincisi, sistemdeki yeni boyut enhancer'dır. Yeni Matchmaker sistemi ile birlikte geliştirilmiş olan Enhancer, floresan nitelikli, renk ve madde yoğunluğu artırılmış daha kuvvetli bir dentin tozudur.

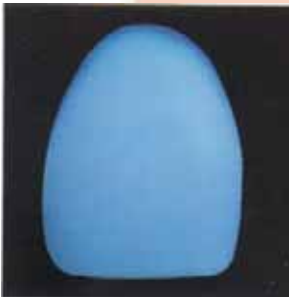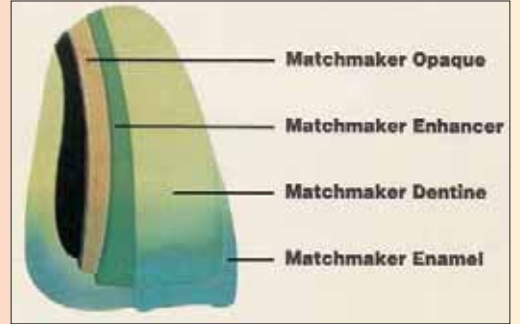

Metal Yansımaz Görünüm

Matchmaker'la ışığın mine ve dentin gibi daha az madde yoğunluğu olan katmanlardan geçip, daha yoğun olan enhancer katmanına ulaşmış, kırılıp geriye yansması sonucu, dar alanlarda bile özellikle kolede ve insizal bölgede görülen metal formunun ve opak renginin yansması problemleri ortadan kalkar.

Skalanın Yakalanması

Toplam porselen çalışma mesafesinin çok az olduğu bölgelerde bile, universal skalada bulunan tüm renk tonları matchmaker'daki enhancer, dentin ve mine gibi farklı renk doygunluğundaki katmanlar sayesinde; makyaj yapmadan aynen yakalanabilir.





Derinlik Hissi

Doğal diş yaklaşık 5 mm kalınlığındadır. Ancak porselen dişte bu kalınlık en fazla 1-2 mm civarında olabilir. İşte matchmaker porselen sisteminin tüm katmanlarında oluşan ışık kırılmaları adeta bir illüzyon yaratarak 1 mm' den daha az mesafede bile size doğal dişteki 5 mm derinlik hissini verir.

Işıma ve Floresanlık

Matchmaker porselen sisteminin doğal dişi yakaladığı ikinci önemli özellik doğal dişle özdeş floresanlıktır.

Floresanlık: ışığın dişteki katmanlardan geçerek kırılması, dağılması ve geriye yansması anlamına gelir. Matchmaker porselen sistemleri patentli özelliği olan ve tozların içine katılan kimyasal ajanlar vasıtasıyla doğal dişin ışığa karşı verdiği reaksiyonu aynen taklit eder. İster gece ister gün ışığı, ister mum isterse güneş ışığı olsun dişlerimiz bu ışık kaynaklarına nasıl reaksiyon veriyorsa onları aynen taklit eder ve insan ağızında doğal komşularıyla ışıma uyumu yakalar.



Doğal Komşularıyla mükemmel renk uyumu

Matchmaker porselen sistemi ile yaratılan dişler, opalesant ve irridesant özelliği ile doğal komşularıyla tam bir ışıma ve renk uyumuna girerek adeta bir bukaemun gibi bulunduğu ortama uyum sağlar ve insan ağızında ayırt edilemez.

Canlılık ve Transparanlık

Zengin alternatifli transparant, opal ve translucent mine serisi ile, aradığınız farklı yoğunluktaki şeffaflık görünümünü ve canlılığı başarıyla sağlar. Böylece insizal katmanlarında istenilen oranda canlılık elde edebilirsiniz.



Sağlamlık ve Yüksek Esneklik Gücü

Matchmaker porselen sisteminin doğal dişi yakaladığı üçüncü önemli özellik; porselenlerin doğal dişi fiziksel özellikleri ile de yakalamasıdır. Matchmaker Metal Seramikler 126 Mpa esneklik katsayısı sayesinde doğal dişlerle uzun vadede aynı oranda aşınır ve oklüzal uyumu muhafaza eder. Bu özelliği ona aynı zamanda metal desteksiz çalışmalarda kullanılması imkanını verir. Ayrıca defalarca fırınlansa bile kimyasal ve fiziksel karakteristik özelliklerini ve metalle olan uyumunu muhafaza ederek güven verir.

Doğal Estetik

Günümüzde diş sağlığı konusunda artık hastalar estetik kavramına daha çok önem veriyorlar ve giderek daha yüksek standartlar ve doğallık talep ediyorlar. Schottlander'in sunduğu Matchmaker bu beklentilere cevap vermek için geliştirilmiş bir porselen sistemidir. Uzun araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucunda en doğal ve saf mineraller kullanılarak yapılan Matchmaker porseleni yeni başlayanlar için son derece affedici, ustalar için ise tamamen kontrol edilebilir niteliktedir.





Kraliçe Ödülü

Schottlander firması bu çalışmalarının ödülünü uluslararası bağımsız kalite onayı veren kuruluşlardan aldığı tüm geçerli kalite standartları ile kanıtlamıştır. Bunlar CE 0120, ISO 9002, EN 46002 ve ISO 13488 'dir

Ayrıca 2000 yılında İngiltere genelinde tüm sektörleri kapsayan en büyük ödül olan Kraliçe ödülüne yeni ürün keşfetme ve geliştirme (Innovation) kategorisinde matchmaker ile layık görülmüş ve dünya dental sektöründe bir ilke imza atmıştır.



Matchmaker'ın Versiyonları

Sistemin tüm versiyonlarında renk doygunluğu, doğal floresanlık, ışıma uyumu, altyapısız görünüm ve kullanıcı dostu özellikler ortaktır.

match *Maker*
MC

Matchmaker MC Classic: Metal altyapı üzerinde, çok katmanlı yapısı ve tüm naturel efektleri ile doğal dişi taklit etmeniz için.

Matchmaker MC T Serisi: Metal altyapı üzerinde süratli çalışma, daha fazla canlılık ve ışık geçirgenlik beklentilerini karşılar.

match *Maker*
PRESS

Matchmaker Press: Çok zengin renk çeşitleri, farklı versiyonları ve aksesuarları ile metal desteksiz kron, laminate, inlay ve onlay tekniklerinde başarınızı artırır.

match *Maker*
LF

Matchmaker LF: Hem press hem de metal altyapı ile uyumlu sentetik leucite özellikli düşük ısı porselen sistemidir.

match *Maker*
ALX

Matchmaker ALX: Dentin linerler ve efekt renkleri ile alüminyum oksit alt yapılar üzerindeki en estetik alternatifi sunar.

match *Maker*
Zr

Matchmaker ZR: Liner, neck dentin, dentin ve mine serisi ile Zirkonyum altyapılar üzerinde de Matchmaker'ın benzersiz estetiğini yakalayabilirsiniz.

METCO DENTAL

•Üst düzey ürünler ve iddialı markalar...

•Kurumsal vizyon ve hizmette mükemmellik perspektifi...

•Disiplinli çalışma, dinamizm ve kalıcılık hedefi...